

Miniadapter

10) Mini-Adapter

mit female- oder male-Anschluss

Mini-Adapter mit female- oder male-Anschluss
in Silikonschläuchen und in durchbohrten Stopfen

sind unersetzlich, denn sie verbinden die Welt der Medizintechnik mit dem normalen Laborgerät:

Glasrohre, Reagenzgläser, Eudiometerrohre, Hofmannscher Apparat, usw.

Gasflaschen, Gasdosen, Wasserhähnen, Pumpen, auch an 100 mL-„Vakuum-Spritzen“ werden immer mit female-Adaptoren versehen.

Hinweis:

Man benötigt mehr female-Adapter als male-Adapter, weil z. B. alle Spritzen mit male-Adaptoren versehen sind.

10) Mini-Adapter


mit female- oder male-Anschluss in Silikonschläuchen



10) Mini-Adapter

Mini-Adapter (f, m) im Silikonschlauch

an Glasrohren oder direkt in durchbohrten Stopfen

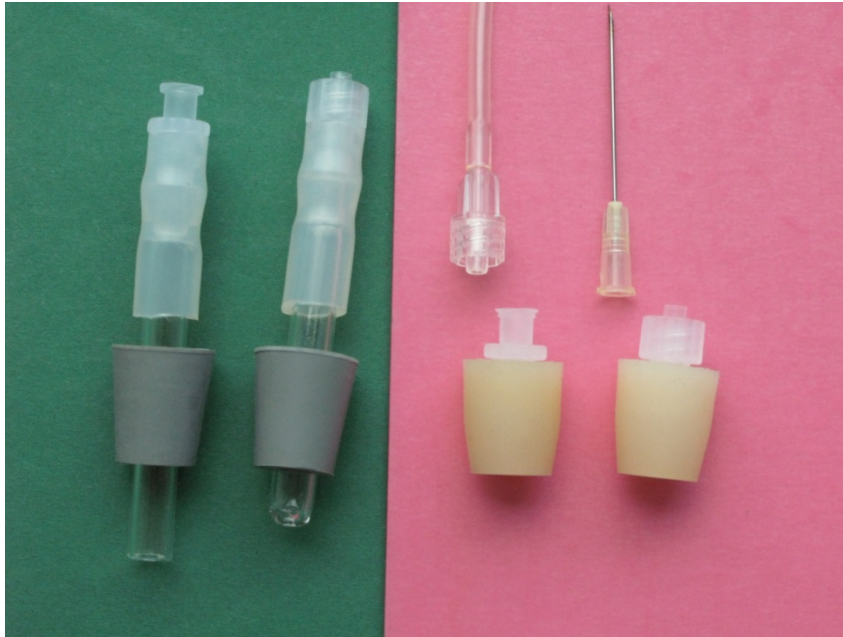

10) Mini-Adapter f-Adapter im Silikonschlauch
an einer Gasflasche am Wasserhahn



10) Mini-Adapter m-Adapter im Silikonschlauch am Kühlwasser-Einlauf



10) Mini-Adapter [Mini-Adapter in durchbohrten Stopfen](#)

Stopfen-Durchmesser: 30 mm, 20 mm, 16 mm, 10 mm



10) Mini-Adapter in durchbohrtem Stopfen (mit DWH)

Durchmesser: 30/25 mm - in Gasmessglocke des Glockengasometers



10) Mini-Adapter f-Anschluss an einer 120 mL-Spritze für Vakuum-Versuche

